

# ESPIRÓMETRO

EJERCITADOR RESPIRATORIO DE INCENTIVO



# DES CRIP CIÓN

El espirómetro es un **dispositivo para rehabilitación pulmonar en pacientes** post covid, post operatorios o **que requieran fortalecimiento pulmonar.**

Se utiliza para analizar la cantidad de aire que pueden retener los pulmones y la velocidad en las inhalaciones y exhalaciones de un paciente.



# MODO DE USO

1

Siéntese y sostenga el dispositivo.

2

Colóquese la boquilla del espirómetro en la boca asegurándose de hacer un buen sellado sobre la boquilla con sus labios.

3

Exhale (espire) normalmente y inhale (inspire) LENTAMENTE.

Una pieza del espirómetro de incentivo subirá a medida que usted inhale.

4

Trate de lograr que esta pieza suba lo más alto que pueda.



Generalmente, un marcador colocado por el médico le indicará qué tan profunda se espera que sea su inhalación. Procure realizar el ejercicio de la forma indicada para obtener resultados más acertados.



# GARANTIA

Contamos con **garantías oficiales** de 6 meses que incluyen los siguientes servicios:

- + Asesoramiento para el uso.
- + Soporte técnico especializado.
- + Respuesta inmediata en caso de mal funcionamiento.



MD

# FICHA TÉCNICA

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CAPACIDAD

1200 ml

### MEDIDA

140 x 35 x 16 mm

### MATERIAL

Polipropileno (PP)

### TEMPERATURA DE TRABAJO

0°C - 120°C

### RANGO DE VOLUMEN

0.1l a 30.3L

## EL SERVICIO INCLUYE

### ASESORAMIENTO PARA SU USO

Vía telefónica o mediante video tutoriales.

### GARANTÍA


6 meses.

### SOMOS UNA EMPRESA PERUANA

que busca importar y brindar la mejor tecnología para el cuidado de la salud. Por ello disponemos de un alto nivel de compromiso para con el servicio de post-venta y emergencias de cualquiera de nuestros dispositivos.

APROBADO POR



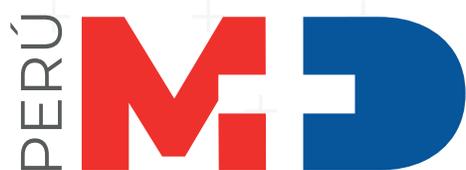

MD Dispositivos Médicos del Perú SAC

# Contáctenos

Nuestra meta es asesorarlo de la manera más personalizada posible.



✉ [ventas@mdperu.com](mailto:ventas@mdperu.com)

📞 +51 960 590 883

🌐 [mdperu.com](http://mdperu.com)

☎ +51 1 4073376

📍 Av. El Ejército 1148. Edificio Time  
Magdalena del Mar- Lima